MANUAL DE USUÁRIO

Neste documento, descrevem-se os passos necessários para que pacientes e profissionais de saúde tenham acesso às funcionalidades desenvolvidas para o aplicativo mobile e site. Apresentam-se abaixo o tutorial para as funções de cadastro de pacientes e profissionais de saúde, definição dos exercícios e do FAQ e configuração do chatbot.

1. Cadastro de pacientes

O cadastro de pacientes pode ser efetuado tanto no aplicativo mobile pelo próprio paciente quanto no site, mediante o profissional de saúde. A seguir, apresenta-se um passo a passo de como realizá-lo em ambas as plataformas.

Mobile


• Na tela inicial, clique em CADASTRE-SE.




- Preencha os campos com as suas informações pessoais. As informações obrigatórias para o cadastro são Nome, CPF, e-mail e senha. É possível registrar, adicionalmente, o RGHC.
- Uma vez concluído, clique em Enviar e confirme o cadastro.




 Para associar a conta a uma fitbit, é necessário que o profissional de saúde acesse https://3.225.179.134/, realize o login e selecione Integração Fitbit.

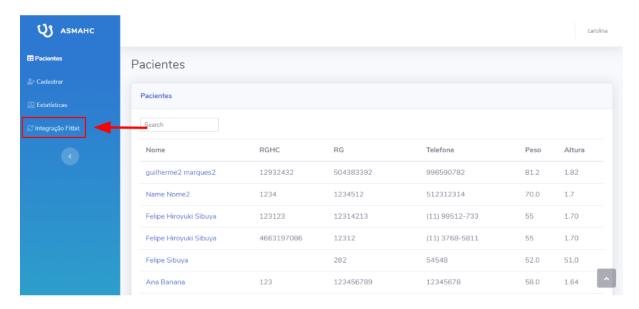

• Preencha o CPF do paciente cadastrado no aplicativo e clique em confirmar.

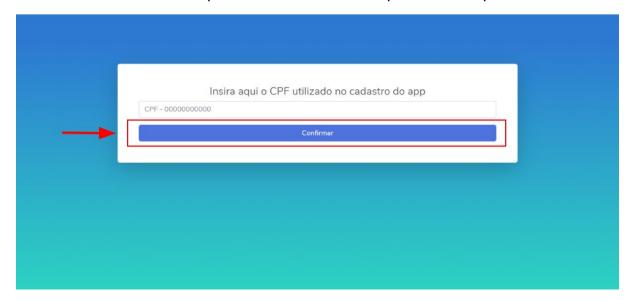


• O profissional de saúde será redirecionado para o site da Fitbit, onde deverá efetuar o login, consolidando a associação da Fitbit à conta do paciente.

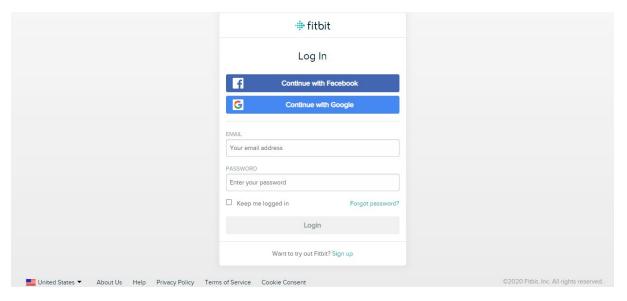

<u>Site</u>


O profissional de saúde deve acessar https://3.225.179.134/, realizar o login e selecionar Cadastrar no menu lateral. Preencha os dados pessoais do paciente, confirmando o cadastro no botão Cadastrar Paciente.

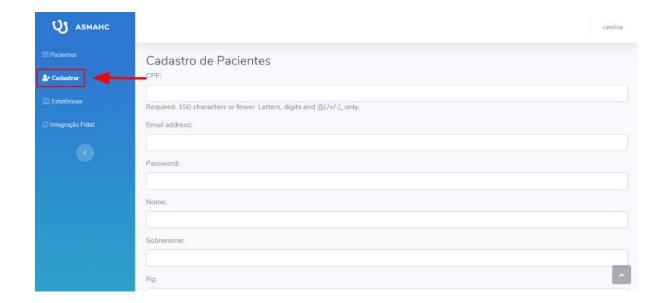

 A associação da Fitbit à conta é análoga ao passo-a-passo explicitado acima na seção Mobile.

2. Cadastro de profissionais da saúde

• Acesse https://3.225.179.134/ e selecione *Criar uma nova conta*.

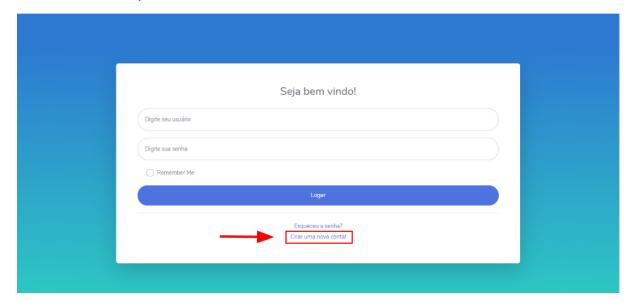

 Preencha as informações solicitadas, clicando em Cadastrar para criar uma nova conta.



3. Definição dos exercícios

Para que o aplicativo identifique um novo exercício adicionado, é necessário que o administrador do serviço utilize uma notação previamente determinada. O arquivo atual se encontra na pasta django_server/media/exercicios.json. Esse arquivo segue o formato JSON, no seguinte padrão:

```
{
    "0": {
        "id": 0,
        "video": "https://www.youtube.com/embed/74G6kn0vjPQ",
        "nome": "Flexão",
        "repeticoes": 30,
        "tempo": 5,
        "descricao": "Exercício que pode ser feito em qualquer lugar e que
envolve diversos grupos musculares. Se não conseguir fazer como no vídeo, tente
faça com os joelhos apoiados no chão."
    }
}
```

Os campos são os seguintes:

- id: identificação do exercício, deve ser o mesmo que o índice externo do objeto, mas sem aspas.
- video: endereço do vídeo no Youtube em modo de compartilhamento
 (https://www.youtube.com/embed/ + código do vídeo), entre aspas.

- o **repeticoes**: número de repetições sugeridas pelo exercício.
- o tempo: tempo sugerido pelo exercício.
- o descricao: breve descrição sobre o exercício.

4. Definição do FAQ

Para que o aplicativo identifique uma nova pergunta adicionada ao FAQ, é necessário que o administrador do serviço utilize uma notação previamente determinada. O arquivo atual se encontra na pasta django_server/media/faq.json. Esse arquivo segue o formato JSON, no seguinte padrão:

```
{
    "0": {
        "id": 0,
        "pergunta": "Eu sinto asma quando corro. Devo evitar essa atividade?",
        "resposta": "De jeito nenhum! Frequentemente apenas se preparar para uma
caminhada de forma diferente pode ajudar. Há duas coisas que você deve lembrar.
Primeiramente, use sua bombinha 15 minutos antes de começar. Além disso, não se
esqueça de se aquecer quando for uma atividade mais intensa."
    }
}
```

Os campos são os seguintes:

- id: identificação da pergunta, deve ser o mesmo que o índice externo do objeto, mas sem aspas.
- pergunta: a pergunta em si, entre aspas.
- resposta: a resposta para a pergunta, entre aspas.

5. Configurações do chatbot

A documentação referente ao *chatbot* é detalhada no arquivo *DOCUMENTAÇÃO - CHATBOTS E IBM WATSON ASSISTANT*.